


Cbit 8 Ultraschallgerät Fa. Chison



Touchscreen

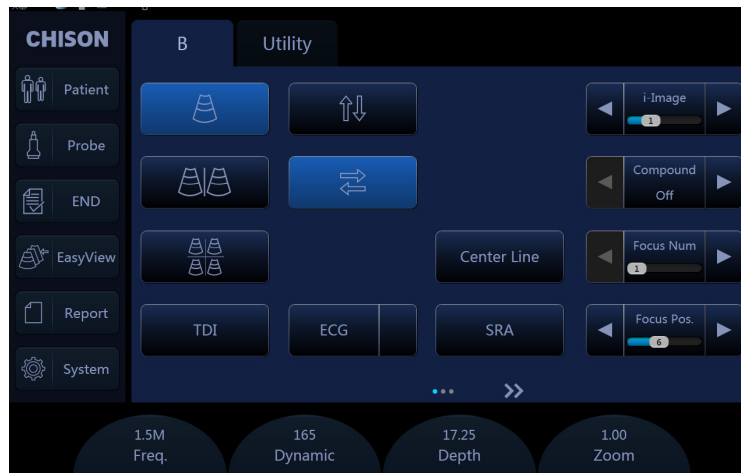

Ein/Ausschalter bzw. Standby



Ultraschallbild auf gesamten Bildschirm vergrößern



Bild speichern



Film speichern



Eindringtiefe ändern



Ein-Klick-Bildoptimierung (auto-image-optimization)



Patientendaten-Eingabe auf dem Touchscreen aktivieren



Sonde und Untersuchung auswählen über Touchscreen



Print 1 und Print 2 sind beide zum Drucken des Bildes freigeschaltet




Exit-Taste zum verlassen von Untersuchungsmodus etc.



Messprogramme entsprechend der ausgewählten Untersuchung



Einfache Distanzmessung (mehrfache Distanzmessungen sind möglich)

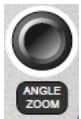

Zur korrekten Platzierung der Mess-Ebenen bei Hüft-Messung



Power-Doppler



Archiv-Ordner (hier finden Sie die Patientenuntersuchungen)



Bodymarker und Eingabe von Texten. Zum Löschen der Eingaben drücken Sie



Inbetriebnahme:

- Gerät einschalten
- Schallkopf und gewünschte Untersuchung auf dem Touchscreen aussuchen. Dadurch werden Presets aktiv.
- Ggf. Patientendaten eingeben und über „OK“ bestätigen. Untersuchungsordner wird dadurch angelegt.
- Frequenz/Eindringtiefe ändern
- Gain (Helligkeit) anpassen
- Nach Untersuchung „END“-Taste betätigen. Speichert die Untersuchung. Anschließend FREEZE-Taste aktivieren. Schont den Schallkopf
- Gerät in Standby durch betätigen der Ein/Aus-Taste und anklicken des Standby-Modus. Erneute Aktivierung des Gerätes dauert 5 Sekunden.
- Oder Gerät komplett herunterfahren. Neustart dauert ca. 80 sek.
- Ladedauer bei entleertem Akku ca. 2,5 h
- Akku hält voll aufgeladen ca. 80 min im Dauerbetrieb
- Verlassen des Menü über EXIT-Taste
- Grundsätzlich alle Modi über EXIT-Taste deaktivieren