



Robuste à tout point de vue

Garrots tourniquets réutilisables appropriés pour tous les établissements médicaux

Garrots tourniquets Prämeta | Un investissement qui s'amortit



Le garrot tourniquet vert – éprouvé des millions de fois



Durabilité extrême

Le matériau du garrot tourniquet permet jusqu'à 25'000 applications. La résistance à la traction a été évaluée dans le cadre de tests d'endurance de 100'000 cycles à 60 % d'extension.

Durabilité : Garrot tourniquet Prämeta* / garrot tourniquet conventionnel


> 10 ans

ø 3.5 ans



* Avec un usage quotidien de 10 applications sur 249 jours travaillés par an.

- Tous les garrots tourniquets Prämeta sont fabriqués dans un tissu en coton durable et très résistant, ce qui permet une utilisation sur de très longues durées.
- Fermeture métallique solide et brevetée faite dans un alliage d'aluminium de haute qualité.

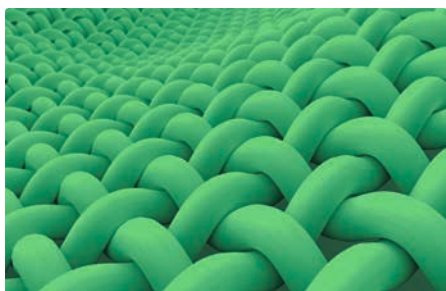

Rendu 3D de la texture de la sangle du garrot tourniquet



Qualité « Fabrication allemande »



- Les garrots tourniquets Prämeta répondent aux exigences de la directive 93/42/CEE et de la réglementation relative aux dispositifs médicaux (Medical Devices Act).
- Marquage CE
- Toutes les sangles des garrots tourniquets Prämeta sont faites de mélanges coton affichant d'excellentes propriétés d'extension.



Sangles de rechange pour garrots tourniquets Prämeta



Durable

- Tous les garrots tourniquets Prämeta sont réutilisables – une garantie supplémentaire de réduction des coûts.
- Stérilisation avec des produits chimiques disponibles dans le commerce ou à l'autoclave à 121 °C/1,1 bar
- Possibilité de re-commander des sangles de rechange



Garrots tourniquets Prämeta | Le garrot tourniquet approprié quel que soit le besoin



RÉF. 70.902.00.001 | Le garrot tourniquet vert

Le garrot tourniquet idéal dans la pratique quotidienne – éprouvé des millions de fois

Le garrot tourniquet vert peut être appliqué et retiré rapidement, d'une seule main. Il est fabriqué avec un tissu en coton durable.

Le garrot tourniquet présente une fermeture métallique solide au design moderne, offre une rétention fiable et comprime la veine de manière optimale. Cela permet également de décongestionner la veine séparément et de manière finement dosée.

Le garrot tourniquet vert | 902 – En un coup d'œil

- + Récompensé du prix iF de conception de produits
- + Le garrot tourniquet peut être appliqué/retiré facilement
- + Manipulable d'une seule main
- + Décongestion séparée, finement dosée
- + Aucun risque de pincement de la peau ou de coincement des poils
- + Tissu en coton durable
- + Fermeture métallique solide - fabriquée dans un alliage spécial de haute qualité
- + Sans latex



RÉF. 70.904.00.001 | Le garrot tourniquet Easy

Le garrot tourniquet hautement efficace doté de toute une série de fonctions

La compression veineuse n'a jamais été aussi simple. Le garrot tourniquet Easy peut être appliqué d'une seule main, tandis que le dispositif spécial de libération garantit qu'aucune pression n'est appliquée sur le vaisseau sanguin. Cela permet un accès aisé, même dans le cas de veines d'accès difficile.

Le garrot tourniquet Easy | 904 – En un coup d'œil

- + Le garrot tourniquet peut être appliqué/retiré facilement
- + Prélèvement rapide du sang tout en préservant la qualité
- + Cannulation par fixation de la veine
- + La veine ponctionnée n'est pas congestionnée
- + Remplissage veineux optimal – ponction simplifiée même en utilisant des canules à lumière de grand diamètre
- + Administration du médicament dans un débit sanguin fluide après mise en place du garrot tourniquet
- + Acidose tissulaire réduite en cas de compression prolongée
- + Fermeture métallique solide – fabriquée dans un alliage spécial de haute qualité
- + Manipulable d'une seule main



RÉF. 70.901.00.001 | Le garrot tourniquet gris


Le modèle classique pour le praticien exigeant

Le garrot tourniquet gris repose sur une technologie éprouvée et impressionne par sa manipulation aisée. Le garrot tourniquet est fabriqué avec un tissu en coton durable qui rend le prélèvement sanguin aussi confortable que possible.

Le garrot tourniquet gris | 901 – En un coup d'œil



- + Manipulation aisée grâce à une technologie éprouvée
- + Fermeture métallique de haute qualité pour une décongestion finement dosée
- + Également aisé à appliquer/retirer en cas de perfusions
- + Tissu en coton durable

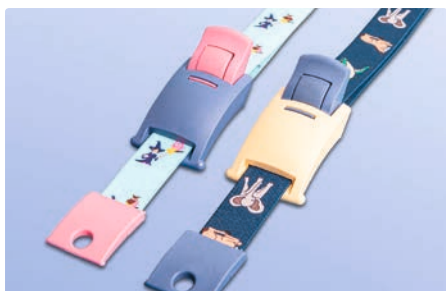

RÉF. Magic 70.906.00.004 | RÉF. Zoo 70.906.00.025
Le garrot tourniquet Magic+Zoo

Notre modèle pour enfant

Les garrots tourniquets Prämeta pour enfants présentent un design de grande qualité et peuvent être aisément manipulés, en toute sécurité et d'une seule main. Une attention particulière a été accordée au perfectionnement de l'ergonomie pendant la fabrication, dans l'optique de ne pas pincer la peau ou coincer les poils, même sur les bras les plus fins.


Le garrot tourniquet Magic+Zoo | 906 – En un coup d'œil



- + Motifs attrayants d'animaux et de magiciens
- + Ergonomie parfaite
- + Conception adaptée aux enfants
- + Décongestion séparée, finement dosée
- + Aucun risque de pincement de la peau – même sur les bras les plus fins
- + Sans métal
- + Manipulable d'une seule main



Garrots tourniquet Prämeta | Toutes les informations en un coup d'œil

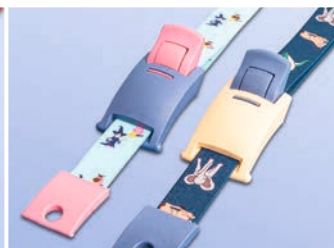

Le garrot tourniquet gris I 901

Le modèle classique pour le praticien exigeant

Le garrot tourniquet vert I 902

Le garrot tourniquet idéal dans la pratique quotidienne – éprouvé des millions de fois

Le garrot tourniquet Easy I 904

Le garrot tourniquet hautement efficace doté de toute une série de fonctions

Garrot tourniquet Magic+Zoo I 906

Notre modèle pour enfant

RÉF. Dahlhausen | Prämeta

70.901.00.001 | 901

Pack en vrac, 252 pièces

70.901.00.002 | 901 M

Accessoires / sangles de rechange

70.901.00.003 | 901-1

RÉF. Dahlhausen | Prämeta

70.902.00.001 | 902

Pack en vrac, 252 pièces

70.902.00.002 | 902 M

Accessoires / sangles de rechange

70.902.00.003, version à deux boutons poussoirs | 902-2
70.902.00.004, version à un bouton poussoir | 902-3

RÉF. Dahlhausen | Prämeta

70.904.00.001 | 904

Accessoires / sangles de rechange

70.904.00.002 | 904-4

RÉF. Dahlhausen | Prämeta

70.906.00.004 | 906 MAGIC

70.906.00.025 | 906 ZOO

Fermeture métallique solide – fabriquée dans un alliage spécial de haute qualité

Sans métal (PA)

Mélanges coton – excellentes propriétés d'extension

Décongestion bien dosée

Déblocage aisé sur un côté

Déblocage aisé sur un côté – en appuyant sur le loquet de verrouillage

Déblocage aisé sur un côté

Sangle enfilée dans la fermeture

Encliquetage facile du loquet de verrouillage dans la fermeture

Fermeture aisée du système de fixation

Manipulation avec les deux mains

Manipulable d'une seule main = compression en tirant sur l'extrémité de la sangle

Aucun risque de pincement de la peau ou de coincement des poils

Toutes les pièces peuvent être autoclavées

- + Éprouvé depuis des décennies
- + Manipulation aisée grâce à une technologie éprouvée
- + Fermeture métallique de haute qualité pour une décongestion finement dosée

- + L'application optimale pour toutes des tâches normales
- + Décongestion séparée, finement dosée
- + Design moderne primé
- + Sans latex
- + Manipulable d'une seule main

- + Cannulation sûre par fixation de la veine
- + La veine ponctionnée n'est pas congestionnée
- + Remplissage veineux optimal – ponction simplifiée même en utilisant des canules à lumière de grand diamètre
- + Administration du médicament dans un débit sanguin fluide après mise en place du garrot tourniquet
- + Pour les tâches particulières : niveau de compression = niveau de ponction
- + Pour les tâches normales : possibilité d'utilisation, par exemple, également dans le bras
- + Manipulable d'une seule main

- + Également approprié pour les bras fins d'enfants
- + Motifs attrayants d'animaux et de magiciens
- + Ergonomie parfaite
- + Sans métal
- + Manipulable d'une seule main



Distribué par :

P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Emil-Hoffmann-Straße 53
50996 Cologne, Allemagne
Tél.: +49 (0) 22 36 39 13-0
Fax: +49 (0) 22 36 39 13-109
info@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de

Fabricant :

Dahlhausen Medizintechnik GmbH
Am Bahndamm 3
38820 Halberstadt · Allemagne
Tél.: +49 (0) 39 41 - 58 87-0
Fax: +49 (0) 39 41 - 58 87-19
info.halberstadt@dahlhausen.de
www.dahlhausen.de

Visitez notre site Internet pour de plus
amples informations.

www.dahlhausen.de